




Инструкция по пользованию аппаратом
Air Flow handy 2+



Порошковые частицы могут войти в глаза, а также и под контактные линзы. Пациент должен снять контактные линзы. Обязательно на пациента нужно надеть очки (защиту), поскольку в глаза могут быть попасть частицы в течение обработки.




Предпроцедурное полоскание с BacterX-Pro для минимума 30 секунд уменьшает бактерии в течение обработки (BacterX-Pro, не доступным в США).

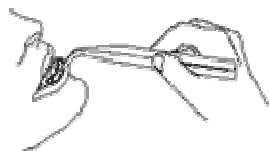


Желательно применить базированную смазку к губам пациента, чтобы препятствовать высыханию их от бикарбоната натрия в течение процедуры. Хлопковые рулоны или 2x2 площадью марли могут использоваться, чтобы защитить мягкую ткань.



Эжектор слюны может использоваться в соединении с быстродействующим эвакуатором.

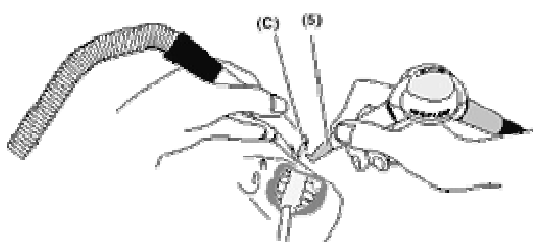


Используйте быстродействующий эвакуатор. Быстродействующий эвакуатор (C) должен быть помещен близко к носику (5) практичным оператором или помощником.

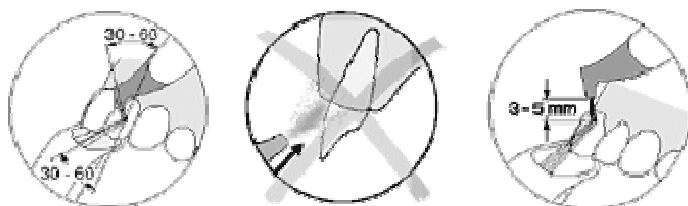


Держите ОБТЕКАЕМЫЙ – носик на расстоянии 3 - 5mm от поверхности зуба. Направьте носик далеко от края десны, если Порошок Clinpro не используется. Угол может измениться между ОБТЕКАЕМЫМ - носиком и зубом приблизительно от 30 степеней до 60 степеней. Чем более плоский угол, тем большая область очищена.




В течение обработки, прямой быстродействующий эвакуатор к воздушному/порошковому потоку, отклоненному зубом. Угол отклонения идентичен углу падения.

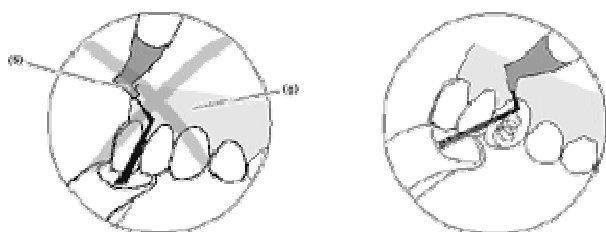


Не направляйте ОБТЕКАЕМЫЙ - носик (5) к ткани резины (g), если Порошок Clinpro не используется. Воздушной/порошковой поток смеси может вызвать рану ткани или когда направлено в эмфизему. В течение обработки, используйте маленькое круглое движение.

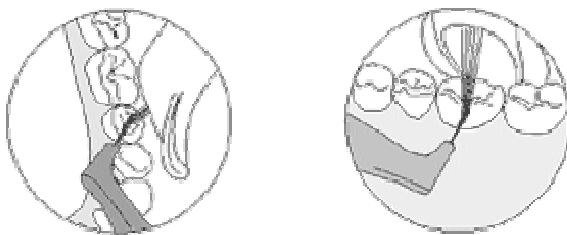

Если Вы желаете полировать поверхности зубов после очистки, регулируйте водный расход к максимуму.

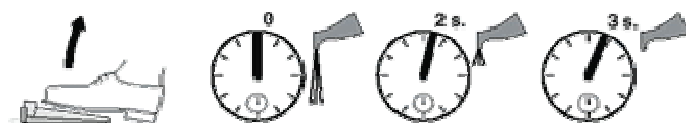

Когда Вы убираете вашу ногу с педали контроля, воздушный/порошковый поток продолжается в течение еще нескольких секунд. Вы можете закончить вашу обработку, обращая на эти секунды внимание.

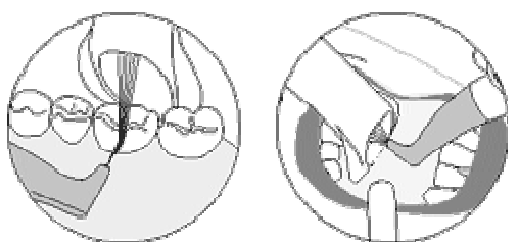

Вы можете также ввести носик в быстродействующий эвакуатор во рту и позволить некоторое время для уменьшать давление, без риска повреждения мягким тканям.



После завершения обработки, пациент может сделать заключительное полоскание. Скажите вашему пациенту, что в течение 2 - 3 часов после обработки, он ни не должен курить, ни потреблять пищу или напитки, которые могли настоятельно окрасить зубы (чай, кофе ...).



Желательно применить фторид после обработки, поскольку зубы фактически свободны. Используйте нейтральный цветной фторид.