

ТУРБИННЫХ НАКОНЕЧНИКОВ, ПЕРЕХОДНИКОВ И ВОЗДУШНЫХ МОТОРОВ

Более подробную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации инструментов и приборов - www.bienair.com


СТЕРИЛИЗАЦИЯ

В АВТОКЛАВЕ КЛАССА В

рекомендуем MELAquick или Vacuklav
фирмы MELAG



СМАЗКА С ПОМОЩЬЮ LUBRIFLUID

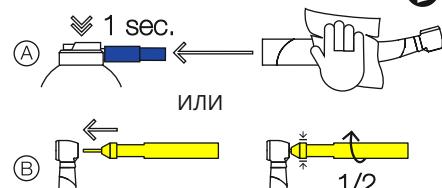


СМАЗКА С ПОМОЩЬЮ LUBRIMED

рекомендуем для ручного способа

ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

рекомендуем MELAtherm 10

фирмы MELAG

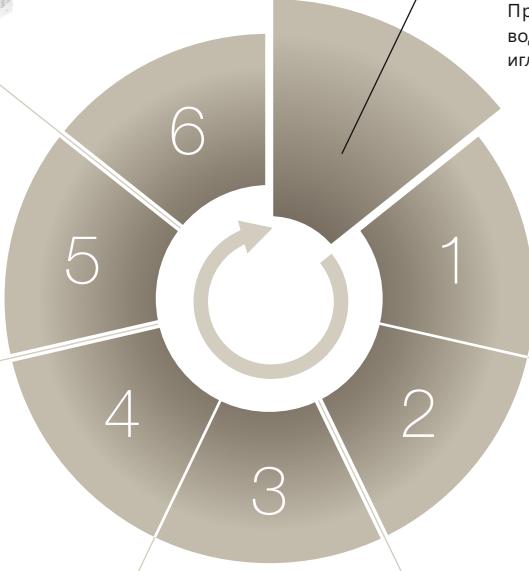


ПОДГОТОВКА




Прочистите отверстия подачи воды/воздуха с помощью чистящей иглы компании Bien-Air


ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА SPRAYNET

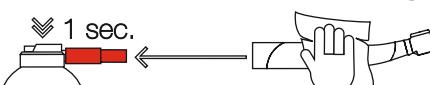

НАРУЖНАЯ ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА SPRAYNET

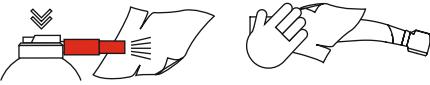


РУЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

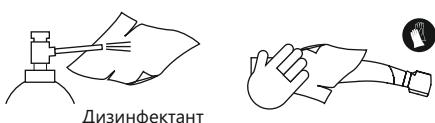

Дезинфицирующий раствор

ПЕРЕД ОБРАБОТКОЙ ТУРБИНЫ

Извлеките бор, перед этим нажмите на кнопку

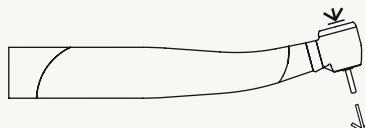

СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для получения более подробной информации о совместимости с системами технического обслуживания (других поставщиков), свяжитесь с ВА

ТУРБИНЫ СО СВЕТОМ



Bora L Blackline LED 1600638



Bora L 1600382



Prestige L Blackline LED 1600640



Prestige L 1600641

турбины под multiflex® KAVO®



Bora LK Blackline 1600731



Bora LK 1600732



Prestige LK Blackline 1600733



ТУРБИНЫ БЕЗ СВЕТА



Bora 1600381



Prestige 1600379



Boralina 1600373



Black Pearl Eco 4-way 1600040



Black Pearl Eco 2/3-way 1600039



Black Pearl Eco 2/3-way 1600039

быстроустранимые переходники



4-way Unifix coupling with light 1600363




4-way Unifix coupling with light 1600086



4-way Unifix coupling 1600082



2-/3-way Unifix coupling 1600081

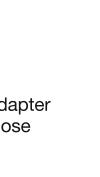


2-/3-way adapter for 4-way hose 1600089



СМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПО УХОДУ НА ОБОРОТЕ (НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПО УХОДУ ЗА ВОЗДУШНЫМИ МОТОРАМИ BIEN AIR

ВОЗДУШНЫЕ МИКРОДВИГАТЕЛИ

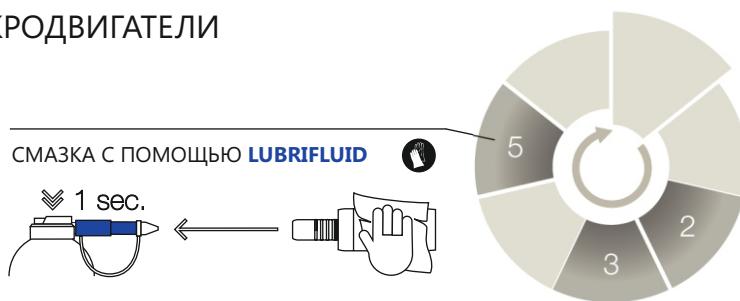

СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА ТУРБИНАМИ И ВОЗДУШНЫМИ МОТОРАМИ BIEN AIR



AquaCare
500 мл чистящее средство
в виде спрея, для очистки
инструментов, используемых
с физиологическим
раствором
арт. 1600617-001



Spraynet
500 мл чистящее средство
в виде спрея, для очистки
инструментов и приборов
арт. 1600036-001



Lubrifluid
500 мл смазочное
средство в виде спрея,
для турбин, механических
наконечников и моторов
серии MX, Basch и Aquilon.
арт. 1600064-001



Lubrimed
Консистентная смазка для турбин
с шарикоподшипниками,
за исключением турбин Eolia.
6 шт в упаковке
арт. 1600037-001



Шприц для смазки Lubrimed
Идет в комплекте с каждым
турбинным наконечником (кроме Eolia).
Для турбин с шарикоподшипниками.
арт. 1000003-001



Чистящая игла
Для прочистки каналов распылителей
турбин, угловых и прямых наконечников.
Идет в комплекте с каждым наконечником.
Так же можно приобрести отдельно, в уп. 10 шт
арт. 1000001-010