



## **HyBase 6100**

Операционный стол



# HyBase 6100

Универсальный операционный стол с электроприводом

## Назначение кнопок ПДУ



Стол фиксирован



Стол подвижен



Продольный сдвиг



Продольный сдвиг



Стол поднят



Стол опущен



Положение Тренделенбурга



Обратное положение Тренделенбурга



Наклон влево



Наклон вправо



Поднятая спинная секция



Опущенная спинная секция



Изогнутое положение  
(концы стола опущены)



Изогнутое положение  
(концы стола подняты)



«Нулевое»  
положение



Поднятый и опущенный подголовник



Поднятая и опущенная ножная  
секция, разведение 180°



Ножная и головная секции оснащены одинаковыми креплениями  
и полностью взаимозаменяемы




Встроенный подъемник-валик



Сконструированный для хирургических процедур разной сложности, операционный стол HyBase требует минимум усилий и времени для безопасной и удобной укладки пациента. Учитывая потребности хирургов и медицинских сестер, компания Mindray предлагает полнофункциональный операционный стол, обладающий следующими достоинствами:

- Улучшенный матрас для комфорта пациентов
- Безопасная и эффективная укладка пациента
- Фирменные разработки для повышения универсальности

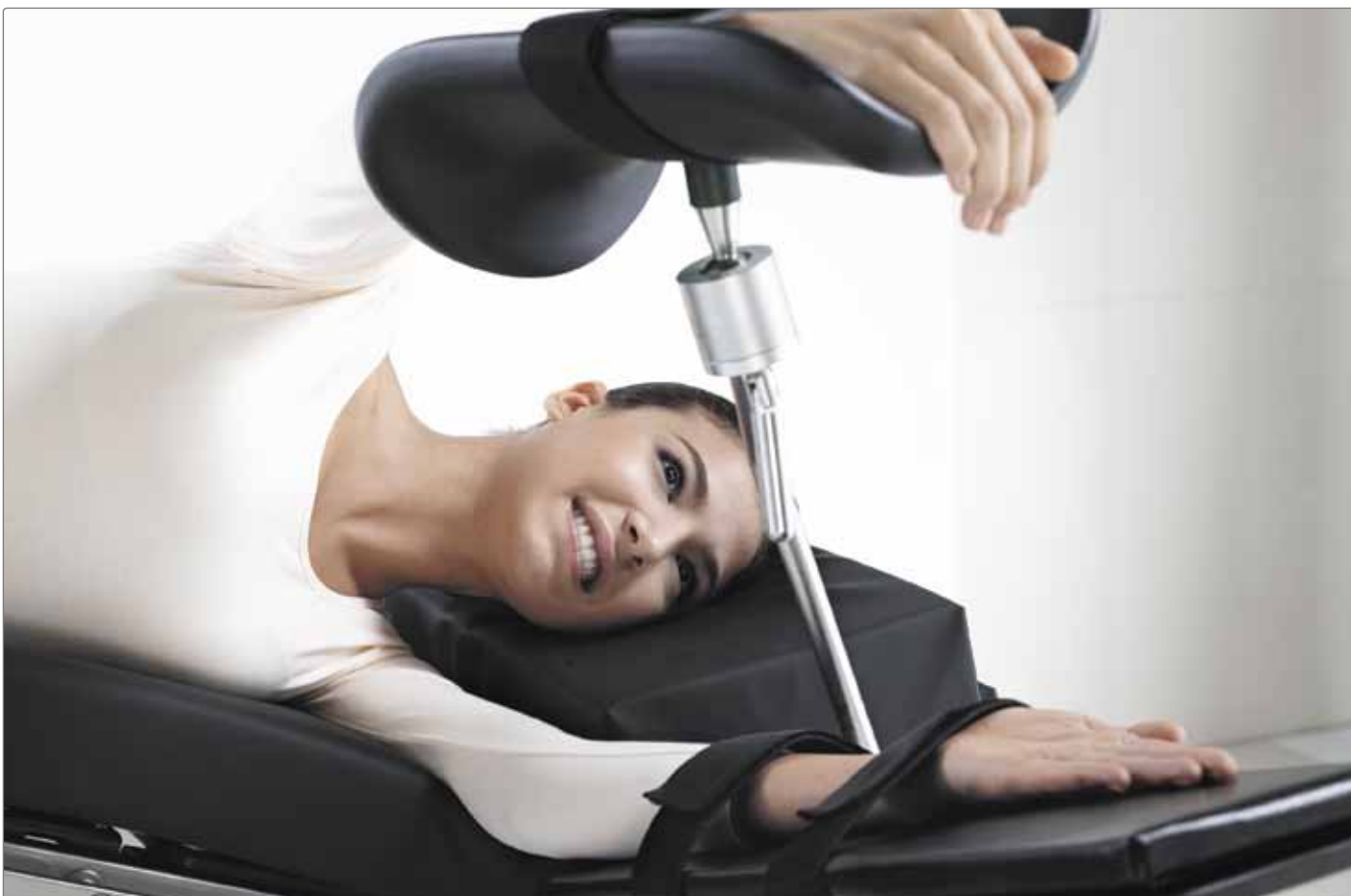

- Декомпрессионный матрас с антистатическим, водонепроницаемым покрытием, изготовленным по бесшовной технологии
- Продольный сдвиг на 320 мм с помощью электропривода
- Максимальная нагрузка 250 кг в нормальном положении
- Максимальная нагрузка 190 кг в развернутом положении
- Заряд аккумулятора на 50—80 операций
- Нижнее положение стола на высоте 600 мм для нейрохирургических и малоинвазивных операций
- Электрическая тормозная система для оптимальной устойчивости стола
- Возвращение стола в нормальное положение нажатием одной кнопки
- Перевод стола в изогнутые положения (с опущенными и поднятыми концами) нажатием одной кнопки
- Рентгенопрозрачная дека стола для свободного доступа С-образной дуги рентгенохирургического аппарата
- Три панели управления, включая пульт дистанционного управления, панель на станине и ножной переключатель

# HyBase 6100

Универсальный операционный стол с электроприводом





Рентгенопрозрачная дека стола с единой ножной секцией для сердечно-сосудистой хирургии




Рентгенопрозрачная тазобедренная секция с ортопедической системой вытяжения




## Специальные накладки эффективно снижают риск возникновения пролежней у пациента

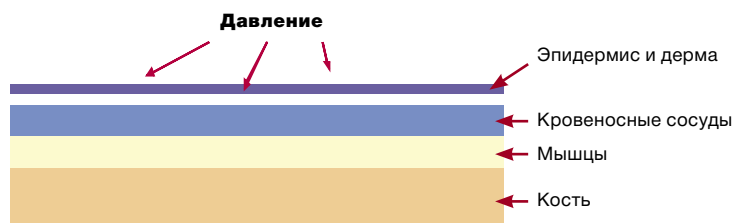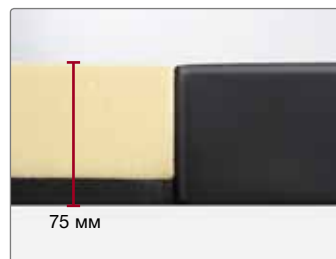

Подкладка может принимать рельеф по фигуре пациента, чтобы обеспечить равномерную силу противодействия и уменьшить давление в области выступающих частей тела, таких как крестец, подвздошная кость, седалищная кость и пяточная кость.

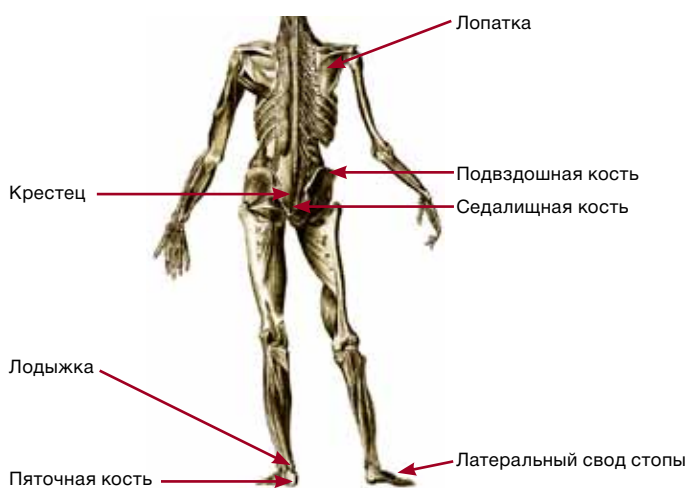

Пролежень

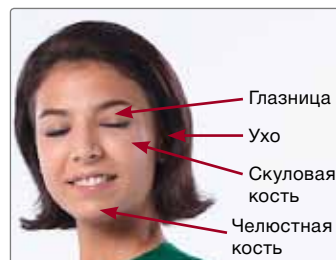

Части лица, восприимчивые к повреждениям

## Комфорт и удобство при малоинвазивных операциях



Нижнее положение стола на высоте 600 мм удобно для выполнения малоинвазивных вмешательств



Использование подушки для укладки пациента на боку



Опора для лобковой области



Использование ножной опоры для укладки верхней руки

Примечание. Все виды укладки пациента, приведенные в брошюре, являются примерами и не представляют медицинской точки зрения.



Литотомическое положение для гинекологии и урологии



Встроенный подъемник-валик, высота подъема — 120 мм



Положение стола в виде шезлонга



Расположение пациента на коленях для операций на межпозвоночных дисках или ректальной хирургии, с 2 малыми опорами для поддержки тела и подножками для колен



Сидячее положение пациента — для нейрохирургии



Подголовник для ЛОР и нейрохирургии



Положение на высоте 400 мм для ЛОР и нейрохирургии

# HyBase 6100

## Принадлежности общего назначения



**0092-30-102646**

Подлокотник (легкий, 1 шт.,  
с универсальным зажимом с круглым отверстием)



**0092-30-102634**

Подлокотник (тяжелый, 1 шт.,  
с универсальным зажимом с круглым отверстием)



**0092-30-102648**

Опора для руки при укладке пациента на бок, 1 шт.,  
с универсальным зажимом с круглым отверстием



**0092-30-102658**

Универсальный зажим (легкий, 1 шт., с круглым отверстием)



**0092-30-102656**

Универсальный зажим (тяжелый, 1 шт.,  
с круглым отверстием)



**0092-30-102655**

Универсальный зажим (тяжелый, 1 шт., с квадратным  
отверстием)



**0092-30-102657**

Универсальный зажим (легкий, 1 шт.,  
с квадратным отверстием)



**115-005689-00**

«П»-образная рамка для анестезии (легкая, 1 шт.,  
с двумя легкими зажимами с квадратными отверстиями)





**0092-30-102645**

Рамка для анестезии (легкая, 1 шт., с легким зажимом с квадратным отверстием )



**0092-30-102654**

Рамка для анестезии (тяжелая, 1 шт., с тяжелым универсальным зажимом с круглым отверстием)



**0092-30-102643**

Держатель флаконов, 1 шт., с универсальным зажимом



**0092-30-102640**

Фиксирующий ремень, 1 шт.



**0092-30-102635**

Тяжелая опора для ног, 1 шт., с универсальным зажимом с круглым отверстием



**115-005685(005683 PU)-00**

Односекционная ножная секция



**0092-30-102649**

Опора для плеч (левая и правая, 2 шт., с универсальными зажимами с квадратными отверстиями)



**0092-30-102637**

Левая опора для плеч с накладкой (тяжелая, 1 шт., с универсальным зажимом с квадратным отверстием)

**0092-30-102671**

Правая опора для плеч с накладкой (тяжелая, 1 шт., с универсальным зажимом с квадратным отверстием)

# HyBase 6100

## Принадлежности общего назначения



**0092-30-102638**

Большая опора для поддержки тела (тяжелая, 1 шт., с универсальным зажимом с квадратным отверстием)

**0092-30-102669**

Малая опора для поддержки тела (тяжелая, 1 шт., с универсальным зажимом с квадратным отверстием)



**0092-30-102650**

Опора для грудной клетки (левая и правая, 2 шт., с универсальными зажимами с квадратным отверстием)



**0092-30-102636**

Левая ножная секция (тяжелая, 1 шт., с универсальным зажимом с квадратным отверстием)

**0092-30-102667**

Правая ножная секция (тяжелая, 1 шт., с универсальным зажимом с квадратным отверстием)



**115-005697-00**

Лоток



**0092-30-102642**

Адаптер для нейрохирургического подголовника



**115-005695-00**

Регулируемый подголовник подковообразной формы



**0092-30-102641**

Фиксатор держателя рентгенографической кассеты (подходит для разных размеров)



**0092-30-102644**

Ножной переключатель




**0092-30-102639**

Подушка для операций на межпозвонковых дисках



**115-005788-00**

Подушка для операций на межпозвонковых дисках

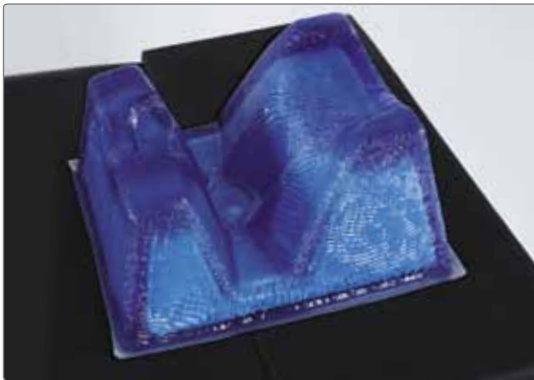

**115-005830-00**

Опора для головы при укладке на живот



**115-005885-00**

Большая подковообразная подушка

**11 5-005887-00**

Средняя подковообразная подушка

**11 5-005889-00**

Малая подковообразная подушка




**115-005910-00**

Подушка для укладки пациента на бок



**115-005814-00**

Пяточная подушка

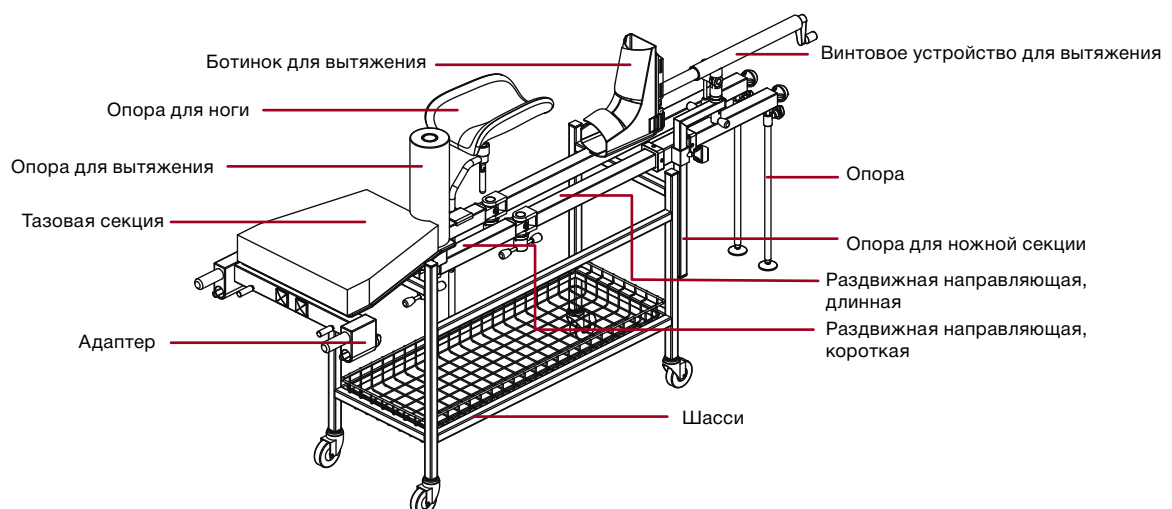

**Ортопедическая система для вытяжения**


115-005691(005778PU)-00

# HyBase 6100


## Универсальный операционный стол с электроприводом

### Технические характеристики


| Размеры                         |            |
|---------------------------------|------------|
| Полная длина                    | 2060 мм    |
| Высота без подушек              | 600—950 мм |
| Ширина без боковой направляющей | 520 мм     |
| Ширина с боковой направляющей   | 590 мм     |

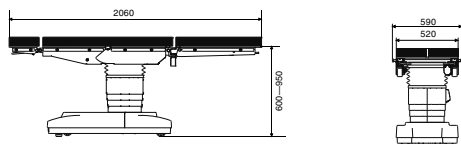


| Положение Тренделенбурга          |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Положение Тренделенбурга          | Макс. 25° |
| Обратное положение Тренделенбурга | Макс. 25° |

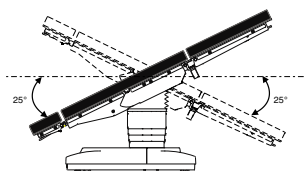


| Ножные секции |           |
|---------------|-----------|
| Угол подъема  | Макс. 20° |
| Угол наклона  | Макс. 90° |

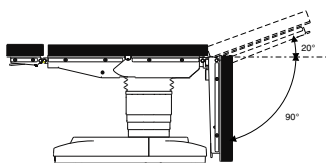


| Изогнутое положение                                   |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Изогнутое положение (концы подняты)                   | 110° |
| Угол подъема ножных секций в положение Тренделенбурга | 25°  |
| Угол подъема спинной и головной секции                | 45°  |

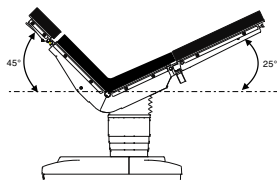


| Продольный сдвиг (опция) |              |
|--------------------------|--------------|
| Сдвиг головного конца    | Макс. 320 мм |

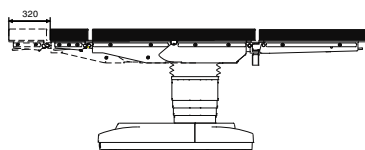


| Боковой наклон      |           |
|---------------------|-----------|
| Угол наклона влево  | Макс. 20° |
| Угол наклона вправо | Макс. 20° |

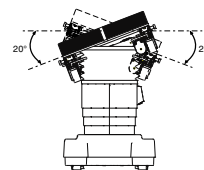


| Спинная секция |           |
|----------------|-----------|
| Угол подъема   | Макс. 80° |
| Угол наклона   | Макс. 40° |

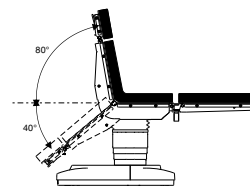

| Головная секция                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Нормальный угол подъема головной секции  | Макс. 45° |
| Увеличенный угол подъема головной секции | Макс. 90° |

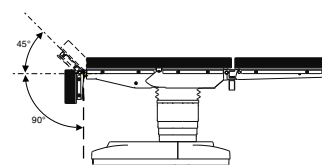

| Изогнутое положение                                            |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Изогнутое положение (концы опущены)                            | 220° |
| Угол наклона ножных секций в обратное положение Тренделенбурга | 20°  |
| Угол наклона спинной и головной секции                         | 20°  |

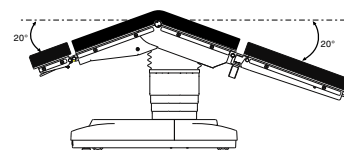

| Подъемник-валик (опция) |              |
|-------------------------|--------------|
| Высота подъема          | Макс. 120 мм |

